

RUSCH U-BAG LATEXFREIES GESCHLOSSENES URINDRAINAGE-SYSTEM MIT STUNDENMESSKAMMER



SICHER UND HYGIENISCH: MAXIMALE SICHERHEIT FÜR DEN PATIENTEN GEGENÜBER NOSOKOMIALEN HARNWEGSINFEKTIONEN

Etwa 90% aller Harnwegsinfektionen werden durch eine Urindrainage verursacht. Abgesehen von den Gesundheitsrisiken für den Patienten selbst stellen solche Infektionen auch ein großes wirtschaftliches Problem dar. Rusch bietet verschiedene Produkte an, die das Infektionsrisiko verringern.

Das geschlossene Urindrainagesystem ist eine der wichtigsten Prophylaxemöglichkeiten gegen Infektionen. Rusch Urindrainagesysteme erfüllen alle hygienischen Anforderungen, die an ein hochwertiges geschlossenes System für die medizinische Langzeitversorgung gestellt werden.


Optimaler Druckausgleich und hervorragende Fließeigenschaften

Zweifache bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftung: an der Tropfkammer und am Urinauffangbeutel. Verhindert Urinstau im Schlauch und das damit verbundene Infektionsrisiko.



AUF EINEN BLICK

- Nadelfreie Urinentnahmestelle
- Tropfkammer mit integriertem Rückschlagventil
- 400 ml aufgesetzte schwenkbare Doppelmesskammer mit integrierter 50 ml Kleinmengenmesskammer
- Zweifache bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftung
- Deutliche Graduierung in ml
- Flexibler und knickstabiler Schlauch
- Optimale Befestigung des Systems
- Tropfsicheres Bodenablassventil
- Latexfrei

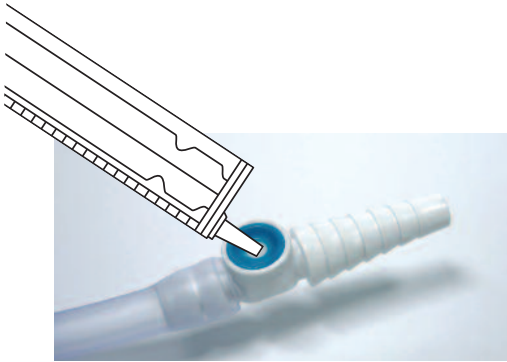

Nadelfreie Urinprobeentnahme
 Urinproben werden am Universalstufenkonus mit einer Luer-Spritze ohne Nadel entnommen. So werden Nadelstichverletzungen vermieden und das Risiko eindringender Bakterien ist stark reduziert. Die Konnektorstufen sind gegen die Abzugsrichtung angeordnet und verhindern das Herausrutschen aus dem Kathetertrichter.



Aufgesetzte, zum Entleeren schwenkbare 400 ml Doppelmesskammer (5 ml-Graduierung) mit integrierter 50 ml Kleinmengenmesskammer (1 ml-Graduierung) mit zusätzlicher Frischurinentnahmestelle



Hygienisches und schnelles Entleeren
 Nachtropfsicheres Bodenablassventil mit Einhandbedienung. „Doghouse“-Halter zur Befestigung des Ablassschlauchs, zur Vermeidung von Kontamination und für zusätzliche Bodenfreiheit.



Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
2000 ml großer Urinauffangbeutel belüftet, mit deutlicher Graduierung

PRODUKTINFORMATIONEN

Latexfreies geschlossenes Urindrainagesystem mit Stundenmesskammer

Rüsch U-Bag		Steril, zum Einmalgebrauch, latexfrei	
Art.	Fassungsvermögen	Schlauchlänge	VE
67 30 64	2000 ml	120 cm	10
67 30 65	2000 ml	150 cm	10

Vertrieb durch:
 Teleflex Medical GmbH • P.O. Box 11 80 • 71385 Kernen • Deutschland
 Tel. +49 7151 406 0 • Fax +49 7151 406 150 • info.de@teleflexmedical.com • www.ruesch.de • www.teleflexmedical.com
 Rüsch Austria Gesellschaft m.b.H. • A-1090 Wien • Österreich
 Tel. +43 (0)1 402 47 72 • Fax +43 (0)1 402 47 72 77 • ruesch.austria@teleflexmedical.com
 Rüsch (Schweiz) AG • CH-3123 Belp • Schweiz
 Phone +41 (0)31 818 40 90 • Fax +41 (0)31 818 40 93 • info@ruesch-schweiz.ch



Belüftete Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre



Optimale Befestigung durch Klettband mit D-Ring